


Comfort DUETT[®]

El compacto amplificador personal multifuncional

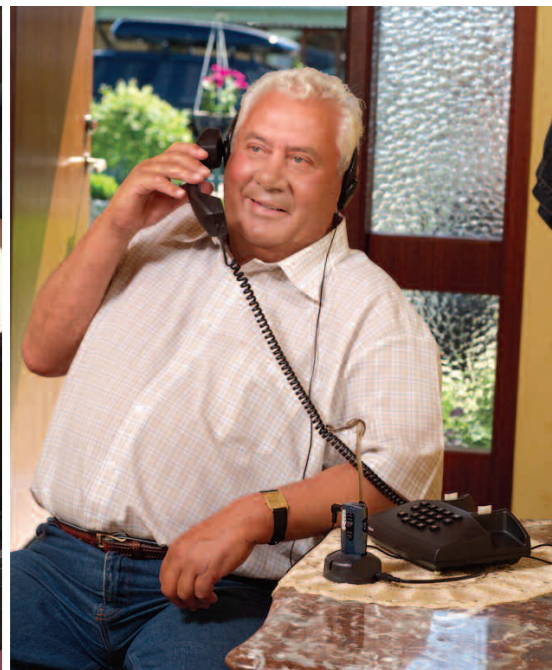

Compacto amplificador personal multifuncional con calidad de sonido superior


Comfort Duett es un dispositivo de ayuda auditiva pequeño, fácil de usar y recargable, con sonido superior. Es elegante y de diseño ergonómico. Comfort Duett amplifica el habla, las conversaciones y los sonidos provenientes de diversos dispositivos de audio, tal como televisores, radio, teléfonos, etc.

La innovadora unidad base funciona como cargador durante la noche y como interconector con equipos de audio como televisores y teléfonos. Cuando se lo utiliza con audífonos, Comfort Duett es muy discreto y se asemeja a un elegante reproductor de música. Si se lo utiliza con los auriculares, Duett es una alternativa a los audífonos o puede complementarlos con su telebobina integrada y un collar inductivo. Estas características hacen que Comfort Duett sea la solución ideal de comunicación para la mayoría de los usuarios.




Soluciones para situaciones de la vida diaria

Amplificador personal

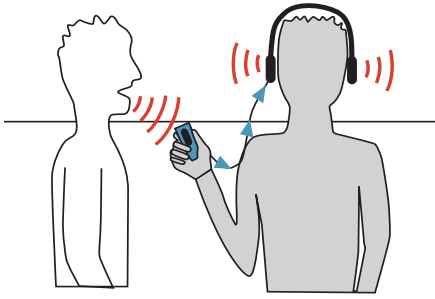


Comfort Duett es una solución de comunicación muy versátil que puede utilizarse como se muestra en la imagen.

En restaurantes ruidosos

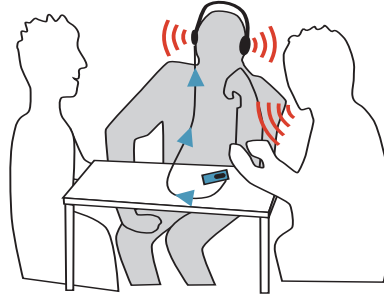


Al colocar el dispositivo Comfort Duett sobre la mesa, se facilita la conversación entre varias personas, incluso en contextos ruidosos.

En el automóvil

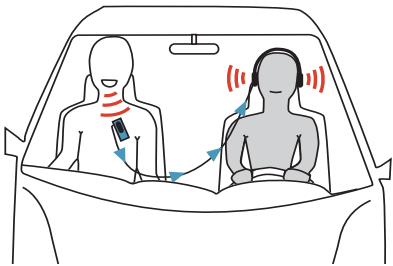

Comfort Duett es muy liviano y tiene un gancho para poder usarlo en la ropa.

Telebobina integrada

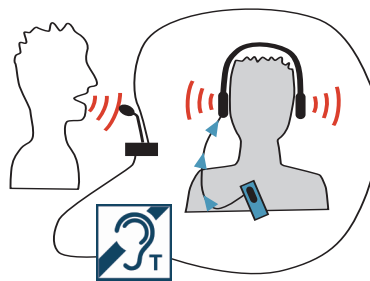

La telebobina integrada permite escuchar con collar inductivo.


Juegos de accesorios opcionales

Para usar con el teléfono



El Juego para Teléfono opcional conecta un teléfono fijo a la unidad base.

Para usar con el televisor

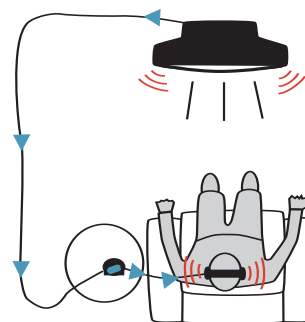

El Juego para Televisor opcional conecta la unidad base con el televisor y con la salida de audio estéreo por medio de un cable de 9 mts y transmite el sonido a través de la unidad base.

Muy versátil y adaptable

Un pequeño dispositivo de audición que se adapta a diferentes usos y amplifica el sonido en conversaciones personales y en pequeños grupos, y de teléfonos y televisores.

Pequeño y liviano

Pequeño, elegante y con diseño ergonómico, Comfort Duett pesa sólo 50 gr.

Para usar con o sin audífonos

Se puede utilizar Comfort Duett con audífonos o auriculares, o con collar inductivo para aquéllos que utilizan audífonos con telebobina integrada.

Para usar en restaurantes ruidosos

Al colocarlo sobre la mesa, Comfort Duett facilita la comunicación en un contexto que suele ser el más desafiante: las conversaciones en restaurantes ruidosos.

Baterías recargables

La batería NiMH (hidruro metálico de níquel) incorporada se carga durante la noche al dejar el dispositivo en la unidad base.

Unidad base: cargador y núcleo integrador

La innovadora unidad base, además de recargar la batería, funciona como núcleo integrador para accesorios, tal como el Juego para Televisor o el Juego para Teléfono. Cuando el comunicador se encuentra sobre la unidad base, amplifica los sonidos provenientes de la fuente electrónica. Cuando se lo retira de la unidad base, Comfort Duett automáticamente cambia a modo de comunicador y capta las conversaciones comunes.

Sonido de calidad superior

El micrófono integrado produce sonidos nítidos y claros, con una amplificación de hasta 60 dB. Por medio de los controles regulables se puede configurar la ganancia máxima y la reducción de graves.

Especificaciones técnicas del Comfort Duett

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tiempo de funcionamiento: | Hasta 20 horas (depende del volumen) |
| Tiempo de carga: | 1 hora de carga = 1 hora de uso (14 horas desde descarga completa a carga completa) |
| Peso: | 50 gr. (incluida la batería) |
| Batería: | Bat. NiMH recargable |
| Tamaño: | 8.6 x 3.8 x 2.9 cm |
| Rango de funcionamiento: | 275 Hz a 9000 Hz |
| Amplificación máxima: | 60 dB (con controles de reducción de graves y ganancia máxima) |
| Nivel máximo de presión acústica: | 133 dB |
| Color: | Azul metálico |
| Garantía: | 2 años de garantía limitada del fabricante |
| Telebobina integrada: | Puede usarse en lugares públicos que cuenten con sistema de inducción magnética |



Distribuido en EE. UU. por:



Comfort Audio Inc
350 South Northwest Highway, Suite 300
Park Ridge, IL 60068
Tel.: 847-656-5450 · Fax: 847-656-5201
Correo electrónico: usa@comfortaudio.com
Sitio web: www.comfortaudio.us

Comfort Audio fabrica dispositivos de ayuda auditiva

Gracias a la dedicación que hemos puesto en la calidad y la innovación en materia de tecnología desde nuestros inicios en 1994, Comfort Audio adquirió reconocimiento internacional de su liderazgo en el campo de los dispositivos de ayuda auditiva (ALD). Además de dispositivos ALD personales, ofrecemos una variedad de sistemas para propiciar entornos laborales activos y sistemas para fomentar el aprendizaje en las escuelas.